

FIR Sauna tunnel Q8110A02

Brugsvejledning



Før du bruger denne vare, skal du læse denne manual grundigt. Samt gemme den til senere brug.



Indhold

Sikkerhed	3
Standard egenskaber	4
Struktur billede.....	5
Germanium Sauna tunnel - F-8110 + F-8115	5
Infrarødt lys: (kun model F.-8115)	5
Germanium introduktion.....	6
Indhold:	6
Anvendelsesinstruktioner.....	7
Opbevaring og vedligeholdelse.....	8
Vær opmærksom på	8
Nødvendigt miljø	8
Teknisk data	8

Kære kunde,

tillykke med dit nye produkt fra Wellmore A/S!

Læg dig ned, slap af og nyd FIR's (lang infrarød stråle varme) healende kraft. Hold hovedet udenfor og afkølet, mens kroppen nyder godt af den infrarøde saunas mange fordele. Behandling kan være et modsvar til hverdagens stress og jag, da komforten og roen i sig selv udgør en healende kraft, i form af den totale afslapning.

Tak fordi du har købt dette produkt, og husk at læse denne manual grundigt, så der ikke forekommer uheld eller tilskadekomst.

Med venlig hilsen
Wellmore A/S.



Sikkerhed

Vær venlig at læse denne sikkerhedsdel af manualen ekstra grundigt, før brug.

Skiltenes betydning		Advarsel/bemærk
		Forbud
		Skal gennemføres/overholdes

Advarsel	
Man må ikke forsøge at reparere produktet selv, da dette kan føre til tilskadekomst eller forværring af produktets tilstand	Træk ikke unødigt i kablerne og læg ikke ting oven på det, da dette kan føre til beskadigelse af produktet
Tag ikke stikket ud af kontakten med våde hænder, da du kan få stød	Brug kun den anbefalede strøm styrke, da andet kan resultere i brand og ødelæggelse
Brug aldrig ødelagte eller beskadigede kabler, da dette kan medføre stød	Sørg altid for at holde stikket rent, da der ellers kan ske beskadigelse i form af brænd
Dette produkt er til indendørs brug, for afslapning og komfort. Intet andet	Ryst/kast ikke tunnelen, da det er et følsomt produkt og kan føre til beskadigelse



Standard egenskaber

- **Maksimal afslapning**

I løbet af få minutter vil FIR saunaen få dig og din krop til at være fuldkommen afslappet. Brug det som afstresning når du kommer hjem fra arbejde, og bare trænger til at koble helt fra. Forkæl din krop med lækre varme og komfortable lang infrarøde stråler og mærk hvordan de negative energier du måtte have i kroppen langsomt forlader dig, for at opnå mere velvære i hverdagen

- **Afgiftning**

Forøget blodcirkulation og forøget iltmængde til din hud via forhøjet krops temperatur fra de lange infrarøde stråler giver næringsstoffer til hele kroppen, og hjælper med at udrense de gift stoffer du måtte have i kroppen

- **Krops form**

FIR saunan tilfører din krop næringsstoffer gennem varmen i huden, og er derfor også med til at nedbryde fedt celler hurtigt og effektivt

- **Forbedret blodcirkulation**

Forbedret blodcirkulation er med til at kroppen optager de næringsstoffer som FIR saunaen sender bedre. Hele dit helbred afhænger af hvordan din krop fungerer, og blodcirkulationen er en af de vigtigste ting overhovedet, og derfor er det en fantastisk egenskab som FIR saunaen har.

- **Lindrer smerte**

Infrarød varme udvider de perifere blodkar. Denne handling bringer ro og komfort til ømme muskler og andre små knubs, og via den forøgede blod cirkulation lindres smerten i ømme muskler og samtidig hjælper varmen med at speede kroppens naturlige healings proces op. Virker blandt andet mod ømhed, hovedpine, ryg smerter og muskel smerter.

- **Styrker hjertekar og immune forsvaret**


Når kropstemperaturen stiger bliver immune forsvaret mere effektivt, og kroppens egen reparationskraft bliver mere effektiv og hurtigere. Når vores hjerte pumper blodet hurtigere og mere effektivt rundt i kroppen, giver det vores hjertekar træning, så de bliver bedre og mere holdbare.




WellMore^{a/s}

wellness i hverdagen

Struktur billede

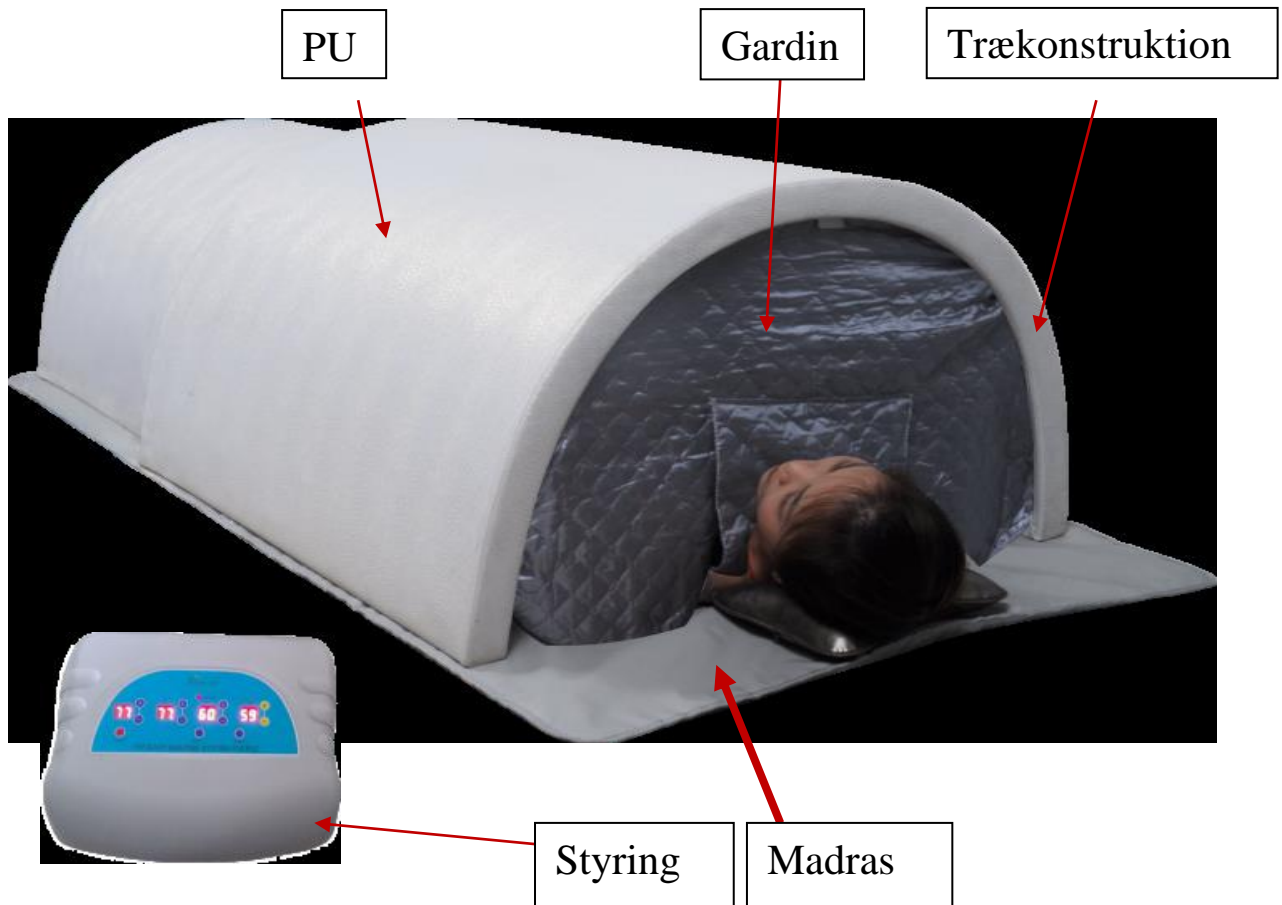


Germanium Sauna tunnel - F-8110 + F-8115

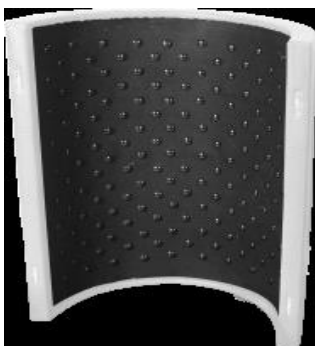

Germanium sten
(kun F-8110+15)



Infrarødt lys: (kun model F-8115)

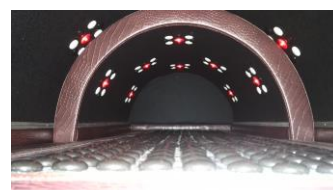



Germanium introduktion

Germanium stenene findes i model F-8110 + F-8115.

Hvad er germanium?

Den organiske germanium forbindelse betragtes som et effektivt middel til bekæmpelse af næsten enhver sygdom .

Forskningen viser, at organisk germanium

- stimulerer immunforsvaret og aktiverer kroppens egne forsvarsmekanismer
- normaliserer mange fysiologiske ubalancer, herunder blodtryk.
- bekæmper frie radikaler
- hjælper med at afgifte kroppen
- forynger blodkarrene
- forbedrer blodcirkulationen
- lindrer kroniske smerter og inflammation
- øger strømmen af ilt i kroppen

Når germanium kommer i nærhed af den menneskelige krop, og støder på et unormalt element, er det dét element der ligger længst væk fra germanium, der hvor alt stress og træthed sidder; germanium skiller sig af med det dårlige element. Germanium bruges i mange ting, f.eks. også i akupunktur.

Germanium er medicinsk med held anvendt ved følgende lidelser: gigt, astma, sukkersyge, psykiske lidelser,

fordøjelsesproblemer, influenza, åreforkalkning, parkinsons syge, udslæt, epilepsi, senil demens, kræftsygdomme, kroniske virusinfektioner, samt grøn og grå stær.

(Kilde: <http://www.sund-forskning.dk/artikler/germanium>)

Indhold:

A: Avanceret PU-læder

B: Aluminiums plade og sort beklædning

C: Træ ramme

D: Indvendig termostat der kontrollerer at det ikke bliver for varmt, for brugerens komfort og sikkerhed.

E: Varme måtten man ligger på

F: Timer, som kan indstilles fra 5-60 minutter

G: Temperaturen fra 25-95 grader celcius, som man selv kan vælge

H: Stof gardin



WellMore^{a/s}

wellness i hverdagen

Anvendelsesinstruktioner

Step 1: Forbind alle 3 grå kabler fra tæppet til styringen

Step 2: Sæt strømstikket til en stik kontakt, og tryk start

Step 3: Tryk POWER foran på styringen. LED displayet vil blive tændt

Step 4: FIR saunaen har to/tre varme områder – brugeren af tæppet kan frit vælge om han/hun vil bruge alle varmeområder, eller en af dem separat.

Step 5: Juster temperaturen i celsius grader, ved at trykke plus eller minus knappen.

Step 6: Juster tiden ved at trykke på enten plus eller minus knappen.

Step 7: Tryk start for at begynde.

Note:

Den lysende prik nederst i venstre hjørne indikere hvilken en af funktionerne der er markeret.

Tryk på den ønskede knap indtil den bliver rød, ligesom den er nederst i venstre hjørne på billedet.










Husk altid at slukke for strømmen til tunnelen samt trykke på OFF på styringen. Pak det pænt og blidt sammen efter brug for at undgå skader.



Opbevaring og vedligeholdelse

- Placer aldrig tunge genstande oven på sauna tunnelen, da det kan beskadige produktet
- Placer sauna tunnelen lodret når den ikke er i brug.

Vær opmærksom på

Advarsel 	
 Når du forlader tunnelen efter det har været i brug, så husk at slå strømmen fra	 Brug aldrig stikkontakter med et dårligt kabel eller en dårlig forbindelse
 Brug aldrig nogen former for spray maling eller kemisk væske i nærheden af tæppet	 Brug aldrig tunnelen i vådt miljø, eller i nærheden af vand.
 Lad aldrig tunnelen ligge i direkte sollys, da dette kan beskadige produktet.	 Begynd aldrig selv at skille produktet ad, hvis der skulle opstå problemer. Kontakt Wellmore A/S.
 Placer aldrig tunnelen i nærheden af åben ild, eller i områder med stor brandfare.	 Dette er ikke legetøj, og det frarådes at give det til børn, uden konstant opsyn.

Nødvendigt miljø

Opbevares i:
0-60 grader celcius
Med maks fugtighed på 85%

Bruges i:
0-40 grader celcius
Med maks fugtighed på 85%

Teknisk data

Strømstyrke: 110-220v Styrke: 1000-1200w
(afhængig af model)
Størrelse: 85*48*95cm
1 stk Sauna tunnel pr pakke
Total længde: 180cm
Ydre tunnel størrelse: 75*40cm
Indre tunnel størrelse: 72*35cm